

醫療器材仿單標籤粘貼表



產品中文名稱	“德山” 假牙再襯底樹脂補材	申請廠商	傑基興業股份有限公司
--------	----------------	------	------------

“德山” 假牙再襯底樹脂補材

衛署醫器輸字第 010964 號

製造批號：

製造廠名稱：Tokuyama Dental Corporation Kashima Factory

製造廠地址：26, Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki 314-0255,
Japan

藥商名稱：傑基興業股份有限公司

藥商地址：「依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊
載(市售品須刊載實際地址)」

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文仿單。但
如市售醫療器材同時放置中、外文仿單者，外文仿單
內容須與核定本之中文仿單內容相符

109.7.23



TOKUYAMA
REBASE II
NORMAL

TOKUYAMA
REBASE II
NORMAL

FOR CHAIRSIDE HARD DENTURE LININGS
AND EXTENSION OF DENTURE BORDERS



ライブピンク
(繊維入り)
LIVE PINK

NORMAL

Manufacturer
Tokuyama Dental Corporation
Kashima Factory
26, Sunayama, Kamisu-shi,
Ibaraki 314-0255, Japan

批號：
保存期限：

 Tokuyama Dental

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“德山” 假牙再襯底樹脂補材	申請廠商	傑基興業股份有限公司
--------	----------------	------	------------

109. 7. 23



TOKUYAMA
REBASE II
NORMAL

FOR CHAIRSIDE HARD DENTURE LININGS
AND EXTENSION OF DENTURE BORDERS



POWDER

80g

ライブピンク
(繊維入り)
LIVE PINK



5066321801

TOKUYAMA REBASE II
NORMAL

POWDER




FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY
 *Store at 0-25°C/32-77° F.
 *Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.

Manufacturer

Tokuyama Dental Corporation
Kashima Factory
 26, Sunayama, Kamisu-shi,
 Ibaraki 314-0255, Japan

批號：

保存期限：

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、
- 製造廠名稱、地址及藥商名稱、地
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“德山” 假牙再襯底樹脂補材	申請廠商	傑基興業股份有限公司
--------	----------------	------	------------

109. 7. 23



5066341801

LIQUID
NORMAL
REBASE II
TOKUYAMA

トクヤマ
リベースII
ノーマル

義齒床用硬質裏装材
(化学硬化・粉液型)

液
50mL

トクヤマリベースII
ノーマル

(管理医療機器)
義齒床用硬質裏装材
(化学硬化・粉液型)
●液…50mL

保管条件: 0~25℃

株式会社トクヤマデンタル
茨城県神栖市砂山26
認証番号 21400BZZ00144000

TOKUYAMA
REBASE II
NORMAL

FOR CHAIRSIDE HARD DENTURE LININGS
AND EXTENSION OF DENTURE BORDERS



LIQUID
50mL

TOKUYAMA REBASE II
NORMAL

LIQUID



FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY
*Store at 0-25°C/32-77°F.
*Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.

Manufacturer
Tokuyama Dental Corporation
Kashima Factory
26, Sunayama, Kamisu-shi,
Ibaraki 314-0255, Japan

批號:
保存期限:

Tokuyama Dental

- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述,最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址,如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“德山” 假牙再襯底樹脂補材	申請廠商	傑基興業股份有限公司
--------	----------------	------	------------

POWDER
NORMAL
REBASE II
TOKUYAMA

トクヤマ
リベース II
ノーマル

義歯床用硬質裏装材
(化学硬化・粉液型)

粉末
80g

トクヤマリベースII
ノーマル

(管理医療機器)

義歯床用硬質裏装材
(化学硬化・粉液型)

●粉末…80g

保管条件：0～25℃

株式会社 トクヤマデンタル
茨城県神栖市砂山26

認証番号 21400BZZ00144000


トクヤマリベースII 粉末



警告

・アレルギー性皮膚炎を
起こすおそれ

109. 7. 23

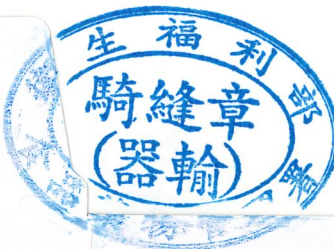

TOKUYAMA
REBASE II
NORMAL

FOR CHAIRSIDE HARD DENTURE LININGS
AND EXTENSION OF DENTURE BORDERS



POWDER
80g

**LIGHT
PINK**
ライトピンク

Tokuyama Dental

5066321801

TOKUYAMA REBASE II
NORMAL

POWDER



FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY
*Store at 0-25°C/32-77° F.
*Keep away from heat, direct sunlight, sparks and
open flames.

Manufacturer
Tokuyama Dental Corporation
Kashima Factory
26, Sunayama, Kamisu-shi,
Ibaraki 314-0255, Japan

批號：
保存期限：

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	"德山"假牙再襯底樹脂補材	申請廠商	傑基興業股份有限公司
--------	---------------	------	------------

生
騎
縫
章
(器)
藥
物



ADHESIVE
REBASE II
TOKUYAMA
Tokuyama Dental

109. 7. 23



**TOKUYAMA
REBASE II**

FOR CHAIRSIDE HARD DENTURE LININGS
AND EXTENSION OF DENTURE BORDERS

ADHESIVE
15mL



5066361803

TOKUYAMA REBASE II

ADHESIVE

REF RB02 

FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY
*Store at 0-25°C/32-77°F.
*Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.
CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

TOKUYAMA REBASE II
Adhesive




Contains : ethyl acetate, acetone
Danger
Highly flammable liquid and vapour.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
No smoking.
Pericolo
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Vietato fumare.
Gefahr
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Manufacturer
Tokuyama Dental Corporation
Kashima Factory
26, Sunayama, Kamisu-shi,
Ibaraki 314-0255, Japan

EC	REP	批號:
		保存期限:

EC Rep.
Tokuyama Dental Italy S.r.l.
Via Chizzalunga, 1
36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
Tel : +39 0444 659650
Fax: +39 0444 750345

North America
Tokuyama Dental America Inc.
Tel: (877) 378 3548 (Toll-Free)

BG МАТЕРИАЛ ЗА ТЪВЪРДО РЕБАЗИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ КРАИЩАТА НА ПРОТЕЗИ В ПРИСЪСТВИЕ НА

CZ PRO TVRDÉ VÝSTELKY ZUBNÍ PROTĚZY PRO POUŽITÍ PŘÍMO V ORDINACI A ZVĚTŠENÍ OKRAJŮ ZUBNÍ PROTĚZY

DE FÜR DIREKTE PROTHESENUNTERFÜTTERUNGEN UND ZEM VERLÄNGERN VON PROTHESEN RÄNDERN

DK TIL HÅRDE PROTESEUNDERFORINGER OG UDVIDELSE AF PROTESEGRÆNSER PÅ KLINIKKEN

EE HAMBARAVIKABINETIS TEHTAVATE KÕVADE PROTEESIVOODRITE JA PROTEESIAARTE PIKENDUSTE JAOKS

EN For Chairside Hard Denture Linings and Extension of Denture Borders

ES PARA REVESTIMIENTOS DENTARIOS Duros Y EXTENSIONES DE BORDES DENTARIOS

FI HAMMASPROTEESIN SUORAAN ERISTYKSEEN JA HAMMASPROTEESIN REUNOJEN PIDENTÄMISEEN

FR POUR GARNITURE DE PROTHÈSE DENTAIRE DURE À CÔTÉ D'UN PATIENT ET EXTENSION DES BORDURES DE PROTHÈSE DENTAIRE

GR ΤΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΝΑΤΟΜΟΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

HU A FOGSOR KÖZVETLEN ALÁBÉLELÉSÉRE SZOLGÁLÓ KEMÉNY ALÁBÉLŐ ANYAGOKHOZ ÉS A FOGSOROK SZÉLEINEK KITERJESZTÉSÉHEZ

IT MATERIALE PER RIBASATURA DIRETTA DI PROTESI E PER L'ESTENSIONE DEI BORDI DELLE STESSE

LT KIETIEMS PROTEZAMS PERBAŽUOTI KABINETE IR PROTEZŲ KRAŠTAMS ILGINTI

LV CIETAJAM ZŪBU PROTĒŽU ODERĒJUMAM UN ZŪBU PROTĒŽU ROBEŽU PAPLAŠINĀŠANAI

NL VOOR HET AAN DE STOEL AANBRENGEN VAN HARDE ONDERLAGEN VOOR PROTHESES EN EXTENSIE VAN DE PROTHESERANDEN

NO FOR HARDE TANNPROTESEFORINGER OG UTVIDELSE AV PROTESEGRÆNSER

PL DO BEZPOŚREDNIEGO WYKONYWANIA PODKŁADÓW PROTEZ I ROZSZERZANIA KRAWĘDZI PROTEZ

PT PARA REVESTIMENTOS DE PRÓTESES DURAS E EXTENSÃO DE BORDOS DE PRÓTESES NO CONSULTÓRIO

RO PENTRU CĂPTUȘIREA PROTEZELOR DURE ȘI EXTINDEREA MARGINILOR PROTEZEI LA SCAUNUL DENTAR

SE CHAIRSIDE-MATERIAL FÖR HÅRD PROTESREBASERING OCH FÖRLÄNGNING AV PROTESKANTEN

SK NA PODLOŽENIA TVRDÝCH ZUBNÝCH PROTĚZ A ROZŠÍRENIE OKRAJOV PROTĚZ UPRAVOVANÉ V ZUBÁRSKOM KRESLE

TR PROTEZLER İÇİN KLİNİKTE UYGULANABİLEN SERT ASTAR MATERYALI OLARAK VE PROTEZ KENARLARININ UZATILMASI İÇİN

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

醫療器材仿單標籤粘貼表

109. 7.

產品中文名稱	“德山” 假牙再襯底樹脂補材	申請廠商	傑基興業股份有限公司
--------	----------------	------	------------

TOKUYAMA
REBASE II
FAST

FOR CHAIRSIDE HARD DENTURE LININGS
AND EXTENSION OF DENTURE BORDERS

- POWDER 80g
- LIQUID 50mL
- ADHESIVE 15mL
- Powder Measuring Cup 1
- Dropper 1
- Rubber Cup 1
- Spatula 1
- Brush 2
- Plastic Cup 2
- TOKUGO RESIN HARDENER 48g
- RESIN HARDENER Spoon 1

批發：
保存期限：

TOKUYAMA
REBASE II
FAST

FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY

Manufacturer
Tokuyama Dental Corporation
Kashima Factory
26, Sunayama, Kamisu-shi,
Ibaraki 314-0255, Japan

REF. FIG. 100

Tokuyama Dental

TOKUYAMA
REBASE II
FAST

FOR CHAIRSIDE HARD DENTURE LININGS
AND EXTENSION OF DENTURE BORDERS

ライブピンク (埋入用)
FAST

Tokuyama Dental

109. 7. 23

加刊

利
章
俞
管



※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

“德山”假牙再襯底樹脂補材
“TOKUYAMA REBASE II”

衛署醫器輸字第 010964 號

23

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用

規格及型號：

1. Normal Set : (Light Pink 與 Live Pink)

Kit

TOKUYAMA REBASE II NORMAL 粉末 (80g)	x 1
TOKUYAMA REBASE II NORMAL 液劑 (50ml)	x 1
TOKUYAMA REBASE II ADHESIVE 結合劑 (15ml)	x 1
量杯 (量粉末專用)	x 1
滴管 (量液劑專用)	x 1
橡膠調拌杯 (混和粉末及液劑專用)	x 1
調拌棒 (將混和好的 TOKUYAMA REBASE II 放至義齒床)	x 1
塑膠量杯 (裝結合劑專用)	x 2
毛刷 (塗抹結合劑專用)	x 2
樹脂硬化促進粉	x 1
樹脂硬化促進粉專用匙	x 1

Refills

TOKUYAMA REBASE II NORMAL 粉末(Light Pink) (80g)	x 1
TOKUYAMA REBASE II NORMAL 粉末(Live Pink) (80g)	x 1
TOKUYAMA REBASE II NORMAL 液劑 (50ml)	x 1
TOKUYAMA REBASE II 結合劑 (15ml)	x 1
樹脂硬化促進粉	x 1

2. Fast Set : (Live Pink)

Kit

TOKUYAMA REBASE II FAST 粉末 (80g)	x 1
TOKUYAMA REBASE II FAST 液劑 (50ml)	x 1
TOKUYAMA REBASE II ADHESIVE 結合劑 (15ml)	x 1
量杯 (量粉末專用)	x 1
滴管 (量液劑專用)	x 1
橡膠調拌杯 (混和粉末及液劑專用)	x 1
調拌棒 (將混和好的 TOKUYAMA REBASE II 放至義齒床)	x 1
塑膠量杯 (裝結合劑專用)	x 2
毛刷 (塗抹結合劑專用)	x 2
樹脂硬化促進粉	x 1
樹脂硬化促進粉專用匙	x 1

Refills

TOKUYAMA REBASE II FAST 粉末(Live Pink) (80g)	x 1
TOKUYAMA REBASE II FAST 液劑 (50ml)	x 1
TOKUYAMA REBASE II 結合劑 (15ml)	x 1
樹脂硬化促進粉	x 1

禁忌症

對 methacrylate 單體及有機溶劑過敏者請勿使用。

儲藏及保存方法

1. REBASE II 應儲存於陰涼處 (0~25°C/32~73°F)，勿使用過期產品。
2. 使用完之後，一定要確實將瓶蓋鎖緊。



- 3.如果超過一個月未使用液劑，請將之放置回原本的罐內，請不要將液劑放置滴管內。
- 4.為了避免誤用或是外溢的意外發生，請將 REBASE II 置於小孩及病患拿不到的地方。

廢棄物處理

- 1.處理剩餘材料時，先將粉末與液劑混合一起使其硬化，注意材料聚合時所生之熱氣。
- 2.利用紗布或棉花將剩下的結合劑吸乾，並依聯邦法規或地區規定處理廢棄物。避免吸入結合劑所揮發的氣體。

臨床注意事項

1. REBASE II 僅限用於說明書所敘述之範圍，切勿使用於範圍以外的任何情況。
2. 本產品僅限牙科專業人員使用。
3. 產品裝置、包裝或材料瓶罐的封蓋有鬆開、外觀破損時，切勿使用。
4. 不可將 REBASE II 結合劑直接塗抹在病患的口中或牙齦上，只可使用於義齒上，並必須在口外操作。
5. REBASE II 的液劑和結合劑皆是易燃物，使用時請遠離火焰，並在空氣流通處使用。
6. 每次在使用完之後，請用酒精擦拭清理，量粉末專用量杯、橡膠調拌杯、毛刷、塑膠量杯、調拌棒等工具。
7. 應該要隨時注意病患對單體樹脂基是否會發生過敏現象，如果會過敏的病患請勿使用本產品；如有過敏現象初徵時，告知病患立即取下義齒並聯絡牙醫師。
 - 使用 REBASE II 一週前，請先幫病患處理黏膜發炎及對舊義齒過敏的症狀。
 - 配戴新墊底好的義齒後，如果發生過敏、紅腫或是潰瘍者，請立即取下義齒，不要配戴。
8. 使用本產品時請戴檢查手套（塑膠或乳膠手套等），避免皮膚產生對單體分子的過敏反應。如果結合劑誤觸到手套，請立即脫去手套並用大量清水沖洗雙手。
 - 從病患口中取出 REBASE II 之後，請立即用水清洗病患口腔或讓病患漱口。
9. 絕對要注意避免接觸眼睛，如果在使用過程中意外接觸眼睛時，請用大量清水沖洗，並立即尋求眼科醫師協助。
10. 避免皮膚接觸到未聚合硬化的化學材料，若意外接觸時，請以酒精擦拭並立即用大量清水沖洗。
11. 上顎墊底時應立即將流向喉嚨的多餘材料取出，以免不慎誤吞或吸入。REBASE II 並非 X 光不透物，所以發生誤吞或吸入時無法偵測出位置。
12. 不可將本說明書以外的材料與 REBASE II 混和使用。
13. 研磨時，必須要戴上合乎規格的口罩，避免吸入粉塵。

臨床操作

- 1.有倒凹的局部義齒或有掛勾的活動義齒，需在口外做修整時，請務必在最終硬化期間開始之前，修整好觀緣，再將義齒放回病患口中，避免完全硬化後，將很難由口中取出義齒。FAST SET 的粉末只能與 FAST SET 的液劑混和；NORMAL SET 的粉末只能與 NORMAL SET 的液劑混和，請勿以 FAST POWDER 與 NORMAL LIQUID 混合使用，反之亦然。FAST SET 的粉末量杯與 NORMAL SET 不同，請使用專用之量杯。
- 2.標準操作時間是指 23°C/73°F（口外狀況），37°C/98°F（口內狀況）；操作時間會因為患者較高的體溫或較高的室溫而減短。
- 3.將量好劑量的 REBASE II 粉末加入量好的液劑（白色蓋子和白色標籤）中，在調拌時可減少氣泡產生的狀況。
- 4.將 REBASE II 結合劑（藍色蓋子和藍色標籤）塗抹在義齒床表面，不要將它與 REBASE II 粉末相混和。


患者注意事項

患者需遵照醫囑在睡前取下義齒，並且清理乾淨。

使用指示


標準粉液比

粉末1格:液劑2格

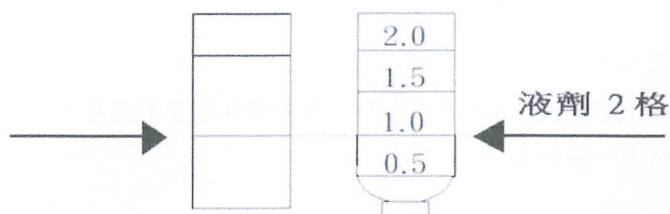

FAST SET 與 NORMAL SET 的粉末量杯不同，請使用特定之量杯。

標準療程

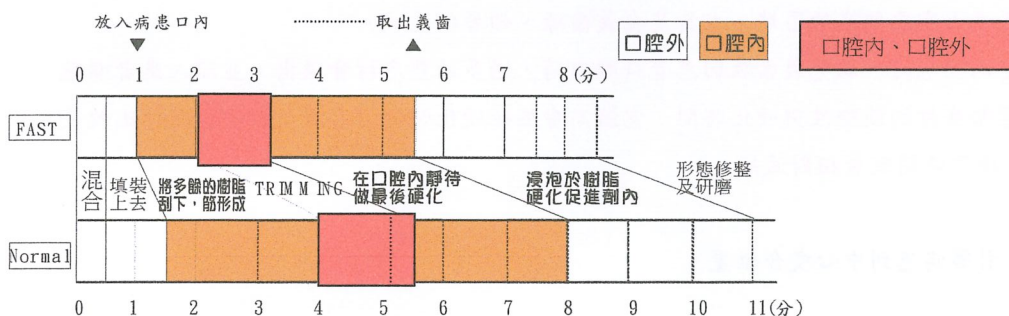

* 療程因室溫與粉液調配比率不同而異

如在口腔外進行修視，請於最終硬化開始前將義齒放回口內

■ 標準操作時間基於 23°C/73°F (口外狀況)，37°C/98°F (口內狀況)

- (1) 檢視舊義齒床密合度
- (2) 清除舊義齒床表面

小心磨除需要墊底處的舊義齒床樹脂表層，露出新樹脂，尤其在需襯底的義齒床黏膜面、義齒床緣、頰側或唇側區。

◎ 注意：

- 1) 需避免接觸到本產品的區域，例如：人工義齒，齒間區等位置，請事先塗上分離劑。
- 2) 墊底區域越大，墊底材的流動相對產生較高抗利的情況下，可將舊義齒床多消除磨掉一些，或適當的地方將義齒床底打洞讓多餘的墊底材流出。

- (3) 結合劑之應用

首先只要塗抹一層於所有需要墊底的區域即可。

◎ 注意：

- 1) 墊底區域的頰側及唇側需要塗抹結合劑
- 2) 義齒床緣的區域，需塗抹兩層的結合劑，以免墊底材與義齒分離。
- 3) 塗抹結合劑後，效力長達十分鐘。
- 4) 結合劑的揮發性非常高，每次使用後，應立即蓋回瓶蓋，並確實蓋緊。



(4) 測量與混和

標準的混和比例為：量杯上一格的 REBASE II 粉末與滴管上兩格的液劑混合。

◎ 注意：

- 1) FAST SET 與 NORMAL SET 的粉末量杯不同，請使用特定的量杯。
- 2) FAST SET 與 NORMAL SET 的滴管是相同的，所以可以通用。

用滴管量好液劑後放入橡膠調拌杯中，再將量好的粉末慢慢倒入調拌杯中，用調拌棒緩緩調拌 5~10 秒鐘，這樣可以減少氣泡混入。

◎ 注意：

- 1) 先將液劑放入調拌杯內再放粉末，可減少氣泡混入。
- 2) 調拌的動作太大或太久也容易混入氣泡，或混和不均勻，並造成表面粗糙、不平整及聚合不完整。
- 3) 如果需要濃稠度高的墊底材，混和時可視情況放多一些粉末。

(5) 裝填墊底材之應用

以調拌棒將墊底材撥放在義齒要墊底的區域。

◎ 注意：

- 1) 在室溫下 FAST SET 快速聚合墊底材操作時間為 20~60 秒鐘
NORMAL SET 一般聚合墊底材則為 30~90 秒鐘。
- 2) 將墊底材鋪放在義齒上需要墊底的區域，尤其是在義齒緣、頰唇側區域。
- 3) 注意不要放入過量的墊底材，以免義齒放回患者口腔內時，過多的墊底材會溢出，並流入患者喉嚨。
- 4) 室溫的高低會影響墊底材的流動性與硬化時間，室溫高會縮短硬化時間，室溫低則硬化時間比較長。如果調拌時間過長，操作時間就會相對減短。

(6) 義齒置入病患口中

義齒置入病患口內後，引導病患到中心咬合位置。

◎ 注意：

- 1) FAST SET 快速聚合墊底材操作時間有 60~90 秒鐘（於一般室溫下），NORMAL SET 一般聚合墊底材則有 90~120 秒鐘。
- 2) 需注意避免偏離中心咬合位置。
- 3) 注意不要讓過多的墊底材流入患者喉嚨。
- 4) 如果有過多的墊底材流入患者喉嚨，請立即用手指或工具將墊底材取出。

(7) 筋形成及研磨

完成上述操作步驟後，在墊底材尚未硬化前在口內做適當的筋形成處理；硬化後由口中取出，視情況加以修磨。

◎ 注意：

- 1) 操作時間
快速聚合墊底材筋形成處理操作時間為 3 分鐘，一般聚合墊底材則為 5 分半鐘。
- 2) 全口假牙的狀況
除了有很嚴重的組織倒凹外，否則硬化前不需將義齒由口中取出，只要將口內將過多的墊底材取出，然後等待墊底材在義齒下完全硬化即可。
- 3) 有組織倒凹和局部活動義齒的狀況
遇到嚴重組織倒凹的全口假牙、局部活動義齒、殘根或其他問題時，需在未完全硬化前由口中取出，並在口外加以修磨，否則一旦完全硬化便很難自口中取下假牙。

(8) 義齒再次放入口中與口內成形 (最終的硬化)

將義齒再次放入口中，靜待最終硬化完成。

◎注意：

- 1) 再次放入口中靜待最終硬化完成時間，快速聚合墊底材從開始混和操作到最終硬化為 3 分～5 分半鐘，一般聚合墊底材則為 5 分半～8 分鐘，這段時間墊底的樹脂材會完全硬化，此期間勿將義齒移出口中，否則接觸到氧氣的墊底表面就不會硬化。
- 2) 太早取出會造成聚合不完全，表面硬化不全，或是墊底材的貼密性的品質降低。

《如何使用樹脂硬化促進劑》

1. 為了加強墊底材的聚合力，可使用樹脂硬化促進劑。
2. 樹脂硬化促進劑可提高墊底材表面的硬度、與義齒拋光的效果。
3. 將 40～60℃ (104～140°F) 的溫水放入容器中。要使用足夠的水確實將義齒完全浸於水中。
4. 每 200 ml 的溫水加入一匙樹脂硬化促進劑。
5. 將義齒床完全浸泡於水中，並浸泡 3 分鐘。
6. 將義齒床取出，沖洗、研磨並拋光。

(9) 形態修正、與研磨拋光

最終硬化完成後，用適當的研磨工具做義齒形態修正、研磨及拋光打亮。

(10) 檢視墊底後義齒床密合度

(11) 墊底完成

使用前請詳讀使用說明書。TOKUYAMA REBASE II 僅限於說明書所提及之範圍，不要用在其他的任何情況。

製造廠名稱：Tokuyama Dental Corporation Kashima Factory

製造廠地址：26, Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki 314-0255, Japan

藥商名稱：傑基興業股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)



REBASE II Normal Kit (Light Pink)




REBASE II Normal Kit (Live Pink)



Rebase II Normal Powder (Light Pink)



Rebase II Normal Powder (Live Pink)

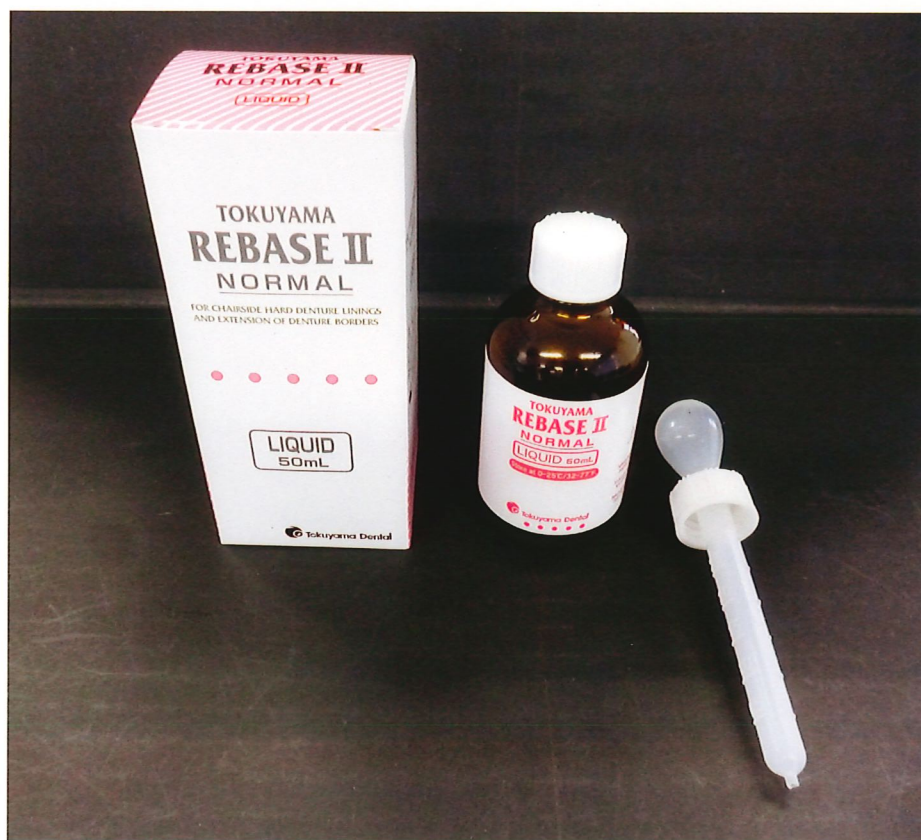

Rebase II Normal Liquid





Rebase II Fast Powder Live Pink

109.

福
縫
器
輸
物



Rebase II Fast Liquid



Rebase II Adhesive

7. 23

